


跳舞氈 Dancing Mat

儀器簡介

此儀器是一個壓力感應拍掣，適合不同程度的傷殘人士作輸入裝置。使用者可於柔軟接觸面上，以身體的活動部份按壓（如：手按、腳踏或坐下等形式），開啓電子產品或其他被連接的電子裝置。此儀器之接觸面大小可供選擇，訂購者可因應自己實際之應用情況而要求特定之尺碼（由4至10吋）。此儀器比一般的拍掣薄，能配合使用者不同的應用需要。

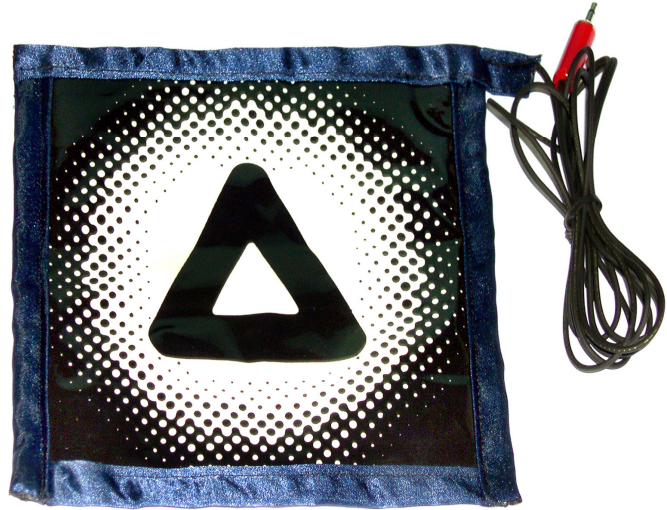

訓練目標

導師或訓練者可靈活運用此儀器，並連接到其他電子產品，以訓練傷殘人士不同部份的身體功能，以達到不同的訓練效果。

安裝

安裝簡單及容易，只須將跳舞氈附有的插頭，直接連接到相對應之電子產品插座中即可。

使用說明

當儀器與相關的電子產品連接好後，使用者只需要給予儀器接觸面一定程度的壓力，即可以啓動該電子產品。

注意事項：

1. 安裝者請謹記要把儀器擺放於平坦及堅固的表面上使用。
2. 如有需要長期擺放，請留意盡量不要給其他重物長期壓於儀器之接觸面上或摺曲儀器。
3. 使用後請清潔，以保持衛生。